

健康で快適な生活を提案する

マルタカ

溜まったらマッサージ、  
きれいに残さずマッサージ。

足を愛しむあなたに

ふくら脛も、足裏も、みんな満足。  
はじめてのウイング型マッサージャー、  
この心地よさは感動です。

*Celevita*

セレヴィータ






# 足裏ローラー老舗のマルタカから、新登場。

## — 今度は、ふくら脛も —

疲れが溜まったら、きれいに残さずマッサージ。  
ソフトなあたりでガッツリ効きます。

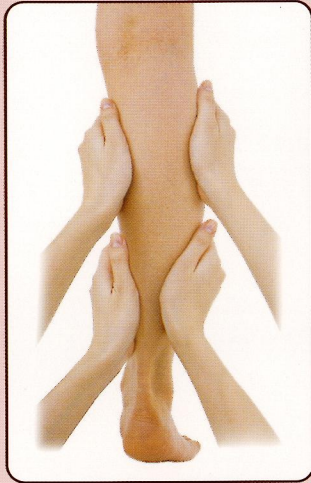


### ふくら脛マッサージ

マルタカ独自の翼のように動くモミボードが、しっかりと手掌で挟み込むようにふくら脛をモミあげます。


### 3つの自動コース

①軽いタッチのタッピング、②リズムカルな押圧、③ギューとふくら脛つかみモミ。多彩なマッサージを組み合わせた3つの自動コースをご用意しました。

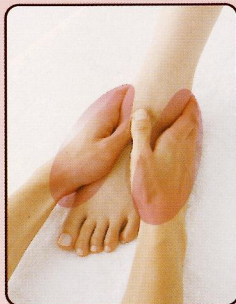


### 甲&側面ホールド

くるぶしの後から甲まで、手で包むように圧迫。同時治療で、足裏マッサージの効果も高まります。

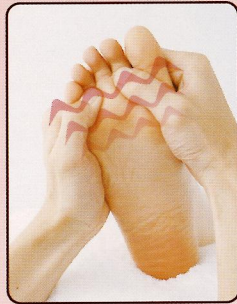

### つま先ほぐしモミ

足指を開き伸ばしながら、上下からほぐしモミ。クイクイと効くほぐしモミは巧妙テクニックです。

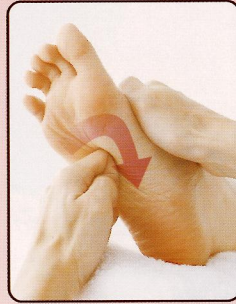

### 足裏マッサージ

疲れの溜まる土踏まずをグイッと押し、足裏全体をくまなく丁寧にマッサージします。



足の出し入れが楽な背面オープン仕様、しかも静音設計です。

*Celevita*  
セレヴィータ

標準小売価格

**140,000円 (税別)**

1年間責任保証

#### 主な仕様

- 管理医療機器 機械器具(77)バイブレーター
- 家庭用電気マッサージ器(JMDNコード34662000)
- 販売名:セレヴィータ
- 医療機器認証番号:219AGBZX00060000
- 定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●消費電力:50W ●定格時間:30分 ●質量:約14kg ●外形寸法:高さ470×幅530×奥行415(mm) ●安全装置:過熱防止装置、過電流保護装置、10分オートタイマー
- ※仕様およびデザインは、改良のため変更することがあります。

JANコード:4969173315013

機種名:RF02M

電気用品安全法技術基準適合確認済



安全に関する  
ご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次の方は使用しないでください。 医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など/ 足に疾患がある人
- 次の方は必ず医師に相談のうえ、その指示に従ってください。 ペースメーカー等の電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人/悪性腫瘍のある人/心臓に障害(狭心症、心筋梗塞)のある人/妊娠初期の不安定期または出産直後の人/糖尿病等による高度な末梢循環障害による知覚障害のある人/高血圧症の人/皮膚に創傷のある人/脚部に重度の血行障害のある人/骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れ等、急性とう痛性疾患の人や骨の弱い人/安静を必要とする人/体温38℃以上(有熱期)の人/その他身体に異常のある人や医師の治療を受けている人
- 使用中に気分が悪くなったり、身体に異常や苦痛を感じたときはすぐに使用を中止してください。
- 本製品に故障や外装の破れなどが発生の場合は直ちに使用を中止し、お買い求め先までご連絡ください。

#### ●操作方法や修理などのご相談は

(製造販売)

株式会社 **マルタカテク**

静岡県藤枝市八幡字広通550-1

**0120-484-100**

平日9時~18時受付(祝祭日、当社の休日を除く)

#### ●その他のお問合せは

株式会社 **マルタカ**

東京都中央区銀座6-16-12 丸高ビル  
http://www.marutaka.co.jp

**0120-224-027**

平日9時~17時受付(祝祭日、当社の休日を除く)

#### ●お取扱店