



スクランブルウェーブ Neo

標準小売価格

435,000円（税別）

仕様

医療機器の区分	管理医療機器
種 別	機械器具(78)家庭用電気治療器
一 般 名 称	家庭用低周波治療器
医療機器認証番号	223AGBZX00248A01
販 売 名	スクランブルウェーブ Neo
機 種 名	IFW 2 MT
定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	18W
本 体 尺 法	幅470×奥行255×高115mm
本 体 質 量	約2.5kg
出 力 波 形	ペインモード:4000Hz + 50~1000Hz スイープ波 トリートメント:パルス通電、スクランブル通電1200Hz トレーニング:パルス通電、スクランブル通電1200Hz
タ イ マ ー	最大設定時間 30分
安 全 装 置	●タイマー ●ソフトスタート機能 ●温度過昇防止
効 能・効 果	肩こりの緩解、痙攣した筋肉の萎縮の予防及び
使 用 目 的	マッサージ効果。一般家庭で使用すること。

付属品

《パッド導子》

コード・ケース・固定バンド
粘着パッド(大)×6枚

《ペイン導子》

コード(2組)・ケース・固定バンド
粘着パッド(小)×12枚

《足導子》



《ヒーター》

ヒーターシート・カバー
固定バンド

※ 上記以外にACアダプター1台、取扱説明書が付属されています。



ISO 13485

JQA-MD0003

株式会社マルタカテクノは、家庭用電気マッサージ器、家庭用エアマッサージ器、家庭用超短波治療器、家庭用低周波治療器、家庭用電位治療器、電位・温熱組合せ家庭用医療機器、低周波・電位組合せ家庭用医療機器、家庭用永久磁石磁気治療器の設計・開発・製造及びアフターサービス(引き取り修理並びにサービスバーチの供給)に対する医療機器における品質マネジメントシステム規格ISO13485:2003年版認証を取得しています。

安全に関する
ご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ○ 次のような機器との併用は誤動作を招く恐れがありますので、使用しないでください。
 ベースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器/人工心肺等の生命維持用医用電気機器/心電計等の装着型医用電気機器/他の治療器や電気製品
 ○ 次のような場合、もしくは身体に異常のある方は、医師に相談の上、指示に従ってください。
 心臓に障害のある方/悪性しゅよう(腫瘍)のある方/体温38°C以上の(有熱期)の方/脊椎の骨折、捻挫、肉離れなどの急性疼痛性疾患の方/妊娠初期の不安定期または出産直後の方/糖尿病などによる末梢循環障害による知覚障害のある方/温度感覚喪失が認められる方/適用部位の皮膚に異常(感染症、創傷など)のある方/安静を必要とする方や体調のすぐれない時/その他、身体に異常を感じている時
 ○ 次のような部位への使用は避けてください。症状が悪くなる場合があります。
 頭部/陰部/口中/皮膚疾患部/心臓の近く
 ○ 身体の不自由な方や寝つきりの方は、必ず介護される方が付き添って使用してください。
 ○ 使用しても効果が表れない場合や、身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
 ○ 本品に万一故障等が発生した場合は直ちに使用を中止し、お買い求め先までご連絡ください。

《製造販売元》

株式会社 マルタカテクノ

静岡県藤枝市八幡字広通550-1
http://www.marutakatechno.co.jp

お客様相談窓口

0120-484-100
Free Dial 平日9時~18時受付(祝祭日、当社の休日を除く)

※仕様・デザインは、改良のため予告なく変更することがあります。印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

スクランブル通電
Powerful + Combination
スイープ変調波

心地よい刺激がからだを
やさしく包みます。

スクランブルウェーブ Neo

もう
がまんしなくて
いいんです。

つらい肩こり・神経痛・筋肉痛に、
身体の奥から効果を発揮します。
身体の深いところに直接作用するスクランブル通電で
シンからほぐす、新しい健康法の電子治療器です。



高級感のあるオーストリッチ柄の合皮レザーカバン
楽々収納して、手軽に持ち運べます。

家庭用電子治療器
スクランブルウェーブ Neo



ペインモード

神経痛や筋肉痛にペイン治療で楽々！

最新技術・スイープ変調波電流により 幅広い痛みに効く

痛みやコリのメカニズムは複雑で、種々の周波数が関係していると言われています。スイープ変調波電流は作用効果を高め、チクチクとした刺激感を軽減するために周波数4000Hzの波形をAM変調しています。

そのコントロールされた電流を50～1000Hzの間で自動可変(スイープ)して、幅広い痛みへの対応とより深い部分への作用を発揮する当社独自のテクノロジーです。

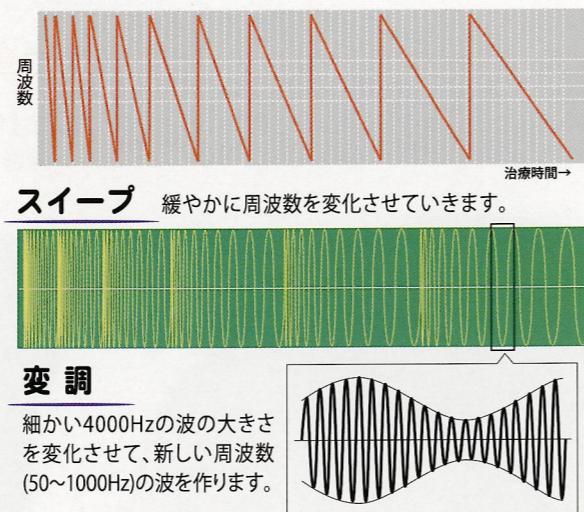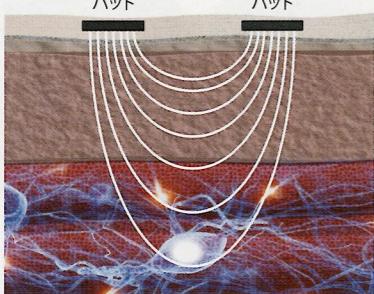

トリートメントモード

肩こり、腰痛、筋肉疲労にリフレッシュトリートメント


パルス通電とスクランブル通電！ 2つの通電で全身すっきり

身体の深いところの筋肉を強く、しっかりと刺激するスクランブル通電。麻痺した筋肉に作用し萎縮を予防します。さらに肌に近い表面部分の筋肉痛をやわらげるパルス通電。スクランブルウェーブ Neo は独自の開発によりこの2つの通電を効果的に組み合わせ、肩や腰、背中、足など浅い筋肉から深い関節・筋肉まで全身のリフレッシュに役立ちます。便利な自動コースも搭載、コンピューターの自動プログラミングにより簡単操作で日々の疲労回復に役立ちます。

パルス通電

軽快な「たたき」やじっくりとした「もみ」など、さまざまな組合せで刺激を与えます。

たたき

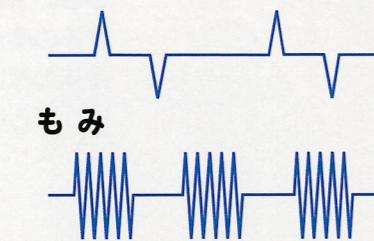


もみ



スクランブル通電

4つの電極からの電流が交わり広い範囲で深く、強く、複雑な刺激をもたらします。

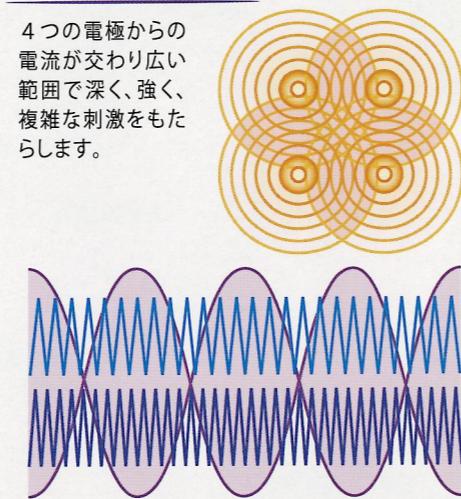

トレーニングモード

気になるおなかや背中をすっきりトレーニング

使用する部位に合わせた 2種類のトレーニング

普段、気になっている部位を簡単にトレーニングできるおすすめモードです。

自動的に刺激と休息を交互に繰り返す為、テレビを見ながら、無理なく簡単に使って長続きできます。パルス通電のSトレーニング、スクランブル通電のDトレーニングと部位によって使い分けられる2つのモードを備えています。



臀筋、大腿筋などの大きく厚い深層の筋肉トレーニングにオススメのモードです。筋刺激と休息を繰り返し、強く深く作用します。

腹筋、側腹筋などの表層の筋肉トレーニングに筋肉の収縮・弛緩をゆっくりしたペースで行います。



効能効果

- 肩こりの緩解
- 麻痺した筋肉の萎縮の予防及びマッサージ効果

マッサージ効果とは：神経痛、筋肉痛の緩解・疲労回復・血行促進・筋肉の疲れをとる・筋肉のコリをほぐす等を指します。



1台4役、家族みんなで使える

お父さんは、毎日の仕事疲れをトリートメントでリフレッシュ！

お母さんは、気になるおなかと太ももをトレーニングですっきり！

おばあちゃんは、つらい膝と腰にペイン治療で楽々！

ヒーターで温めながら、ポカボカリラックス！

家庭用電子治療器
スクランブルウェーブ Neo



選べる3つの専用導子

健康・美容コース	導子	コース名
ペインモード (スイープ変調)	ペイン	ノーマルコース
トリートメントモード (パルス/スクランブル)	パッド足	たたきコース
トレーニングモード (パルス/スクランブル)	パッド足	ソフトコース
		もみコース
		スクランブル
		もみ
		Dトレーニング
		Sトレーニング

2力所同時治療

肩と足裏、腰と足裏など、パッド導子と足導子で2力所同時治療が可能です。また、ペイン導子で、両膝両肩など2力所の同時治療ができます。




[パッド導子・ペイン導子]
1枚のパッドに大きな2つの電極を配置、狙った部位に貼って使う粘着性導子。粘着性を保持するための専用ケース付。



[足導子]
両足をのせるだけの簡単足裏健康導子。

さらにうれしい温め機能

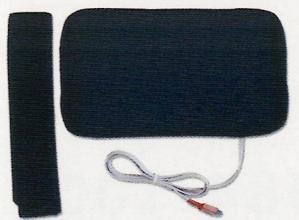

[ヒーターパッド]
足・手・腹部などを温めます。導子の上からあてて、気持ちよく治療ができます。